

AED 보관함 설치 매뉴얼



“황금의 4분” 생명을 살리는 기업

최 종 임 이사

나눔테크 공식 지정업체 **NT3000**

11946 경기도 구리시 이문안로 138 우신빌딩 2층

T 031-553-1339 **M** 010-5249-0523

F 031-553-0043 **E** kmart25@naver.com




영 우 테 크

031-553-1339

www.aed.co.kr

1. 보관함 구성

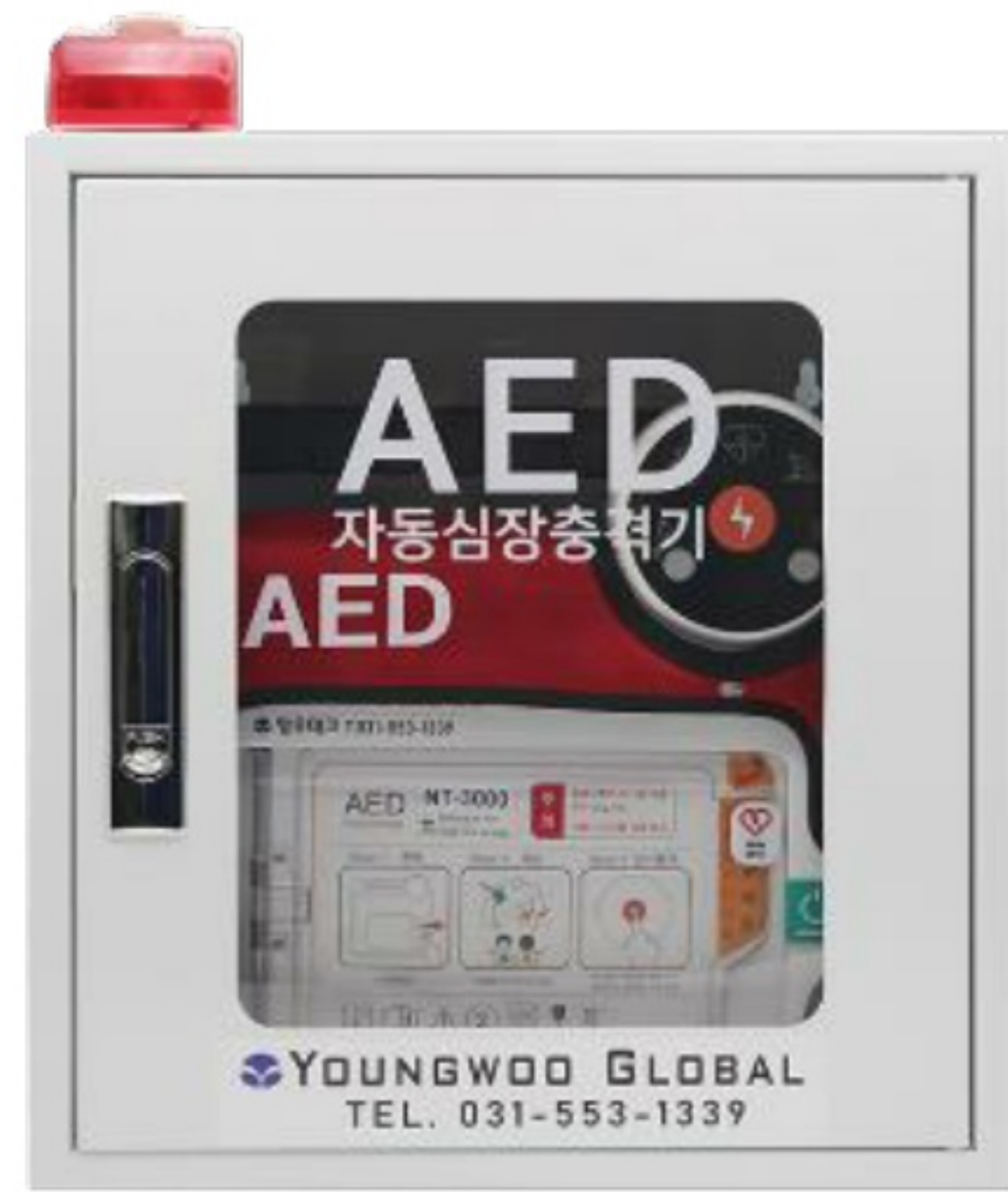

벽걸이 구성품목

- 경광등 세트(1)
- 보관함 본체(1)
- 나사(4)
- 칼블럭(4)

스탠드 구성품목

- 경광등 세트(1)
- 보관함 본체(1)
- 발판(1)
- 볼트(4)

경광등 구성품목

- 경광등(1)
- 9V 건전지(1)
- 스위치(1)

※ 경광등 구성품은 상단 보관함 내부에 동봉

2. 경광등 설치방법



1. 경광등 위치 구멍에 선을 넣어 준다.



2. 양면테이프를 뒤편에 맞춰서 붙인다.



3. 안쪽 우측상단에 푸시 연결선을 끼어 넣는다.



4. 경광등 연결선과 푸시 연결선을 연결해준다.



5. 위쪽에 걸어서 선을 정리해준다.

3. YWG-20, 30 경광등 관리

일반 철제 보관함 경광등



건전지 교체



1. 경광등 흰색덮개를 열어준다.



2. 9V 건전지와 연결 혹은 교체 후 닫아준다.

3-1. YWG-10 경광등 관리

플라스틱 보관함 경광등




※ 보관함 안쪽에 설치 되어있습니다.

건전지 교체



흰색 덮개를 열어주고
수은건전지(LR44)을 교체해준다

버튼 조절

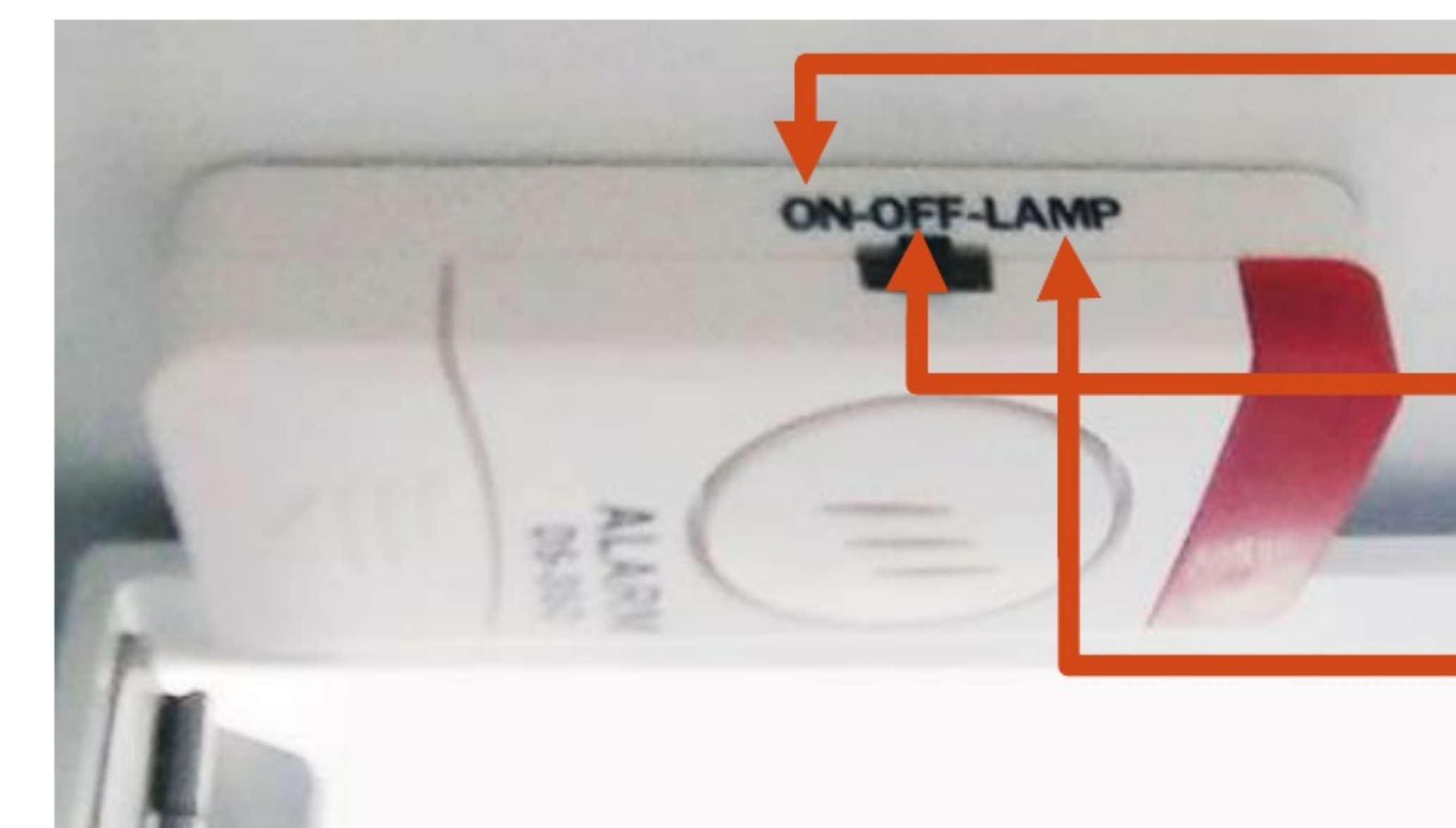

큰소리 알림&불빛 : 오른쪽

경광등 중지(OFF) : 가운데

작은 소리 알림&불빛 : 왼쪽


4. YWG-10, 20 설치방법



1. 설치 위치 선정 후
칼 블록으로 보관함 구멍
간격에 맞춰 벽을 뚫어준다.



2. 보관함 구멍과 칼 블록을
맞추고 나사로 고정합니다.

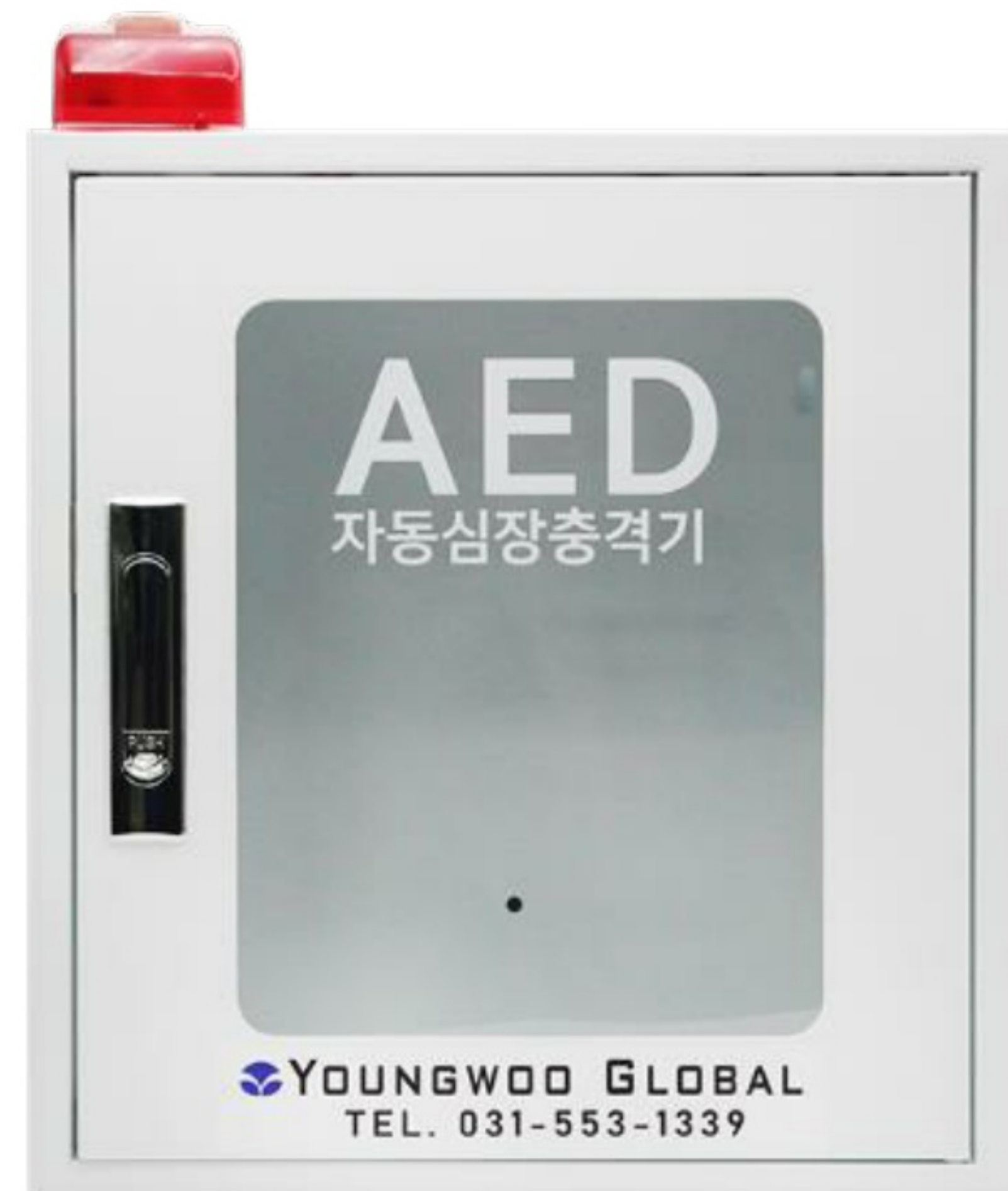

5. YWG-30 설치방법



1. 보관함을 눕혀준다.

2. 받침대와 구멍을 맞추고
나사로 연결해 준다.



3. 받침대 아래 고정다리
균형을 맞춘다.

4. 세우면 완성

